

Cannulated Screw

キヤニュレイテイド
スクリュー

3.0 mm

3.5 mm

4.0 mm

4.5 mm

5.5 mm

6.5 mm





Cannulated Screw

CONTENTS

● 3.0 mm Cannulated Screw

P.3

- ・コーティカル スクリュー
- ・キャンセラス スクリュー

フラットワッシャー
スパイク付きワッシャー



● 3.5 mm Cannulated Screw

P.4

- ・コーティカル スクリュー
- ・キャンセラス スクリュー

フラットワッシャー
スパイク付きワッシャー



● 4.0 mm Cannulated Screw

P.5

キャンセラス スクリュー

フラットワッシャー
スパイク付きワッシャー



● 4.5 mm Cannulated Screw

P.6

キャンセラス スクリュー

フラットワッシャー
スパイク付きワッシャー
ツバ付きワッシャー



● 5.5 mm Cannulated Screw

P.7

キャンセラス ヒップスクリュー

フラットワッシャー



● 6.5 mm Cannulated Screw

P.8

キャンセラス ヒップスクリュー

フラットワッシャー



骨頭すべり症用

P.9~10

● 5.5 mm / 6.5 mm Cannulated Screw SCFEショートスレッド スクリュー

フラットワッシャー



豊富なサイズバリエーションを揃えています。

メイラの製品開発ポリシー

医療現場のニーズやドクターのアイデアを製品化

メイラは豊富な生産設備や、試験設備を背景に長年培った金属加工技術を生かし、様々な製品を創作できる可能性を持っています。研究・試作・試験により新しい製品を生み出す活動がメイラの基本姿勢です。



★ メイラ キャニュレイティド スクリューの特徴 ★

トルクス締め付け機構

ねじ廻し機構には**TORX®**（トルクス）を採用していますので、ドライバーがすべったりスクリューのリセス部を傷めたりすることなく、確実にトルクを与える事ができます。

トルクスは米国カムカー・テキストロン社とメイラとの技術提携品です。



六角：点接触



トルクス：面接触

チタン合金製

スクリュー及びワッシャーの材料は生体親和性と強度に優れたチタン合金(Ti-6Al-4V)ASTM F136を使用しています。

リバースカッティング

逆回転のカットにより、抜去を容易にしております。
※φ3.0mm、φ3.5mmスクリューを除きます。



セルフタッピング※1

タップ切りの作業が不要です。



セルフドリリング※2

ドリルによる穴あけ作業が不要です。



※1、※2

スクリューにはセルフドリリング、セルフタッピング機構が施されていますが、必要に応じてドリリング、タッピングを行ってください。

3.0mm ミニキャニュレイトドスクリュー

★インプラント

コーティカル スクリュー



製造承認番号: 20700BZZ00125000

カタログ番号	全 長	標準セット入数
005A-002-012	12mm	2
005A-002-014	14mm	2
005A-002-016	16mm	2
005A-002-018	18mm	2
005A-002-020	20mm	2
005A-002-022	22mm	2
005A-002-024	24mm	2
005A-002-026	26mm	2
005A-002-028	28mm	2
005A-002-030	30mm	2
005A-002-032	32mm	2
005A-002-034	34mm	2
005A-002-036	36mm	2
005A-002-038	38mm	2
005A-002-040	40mm	2

キャンセラス スクリュー



製造承認番号: 20700BZZ00125000

カタログ番号	全 長	標準セット入数
005A-008-012	12mm	2
005A-008-014	14mm	2
005A-008-016	16mm	2
005A-008-018	18mm	2
005A-008-020	20mm	2
005A-008-022	22mm	2
005A-008-024	24mm	2
005A-008-026	26mm	2
005A-008-028	28mm	2
005A-008-030	30mm	2
005A-008-032	32mm	2
005A-008-034	34mm	2
005A-008-036	36mm	2
005A-008-038	38mm	2
005A-008-040	40mm	2

フラットワッシャー



製造承認番号: 20900BZZ00861000

カタログ番号	内 径	外 径	標準セット入数
017A-001-08004	φ4mm	φ8mm	2

スパイク付きワッシャー



製造承認番号: 20700BZZ00125000

カタログ番号	内 径	外 径	標準セット入数
005A-016-06		φ6mm	2
005A-016-08	φ3.6mm	φ8mm	2
005A-016-10		φ10mm	2

★手術器具

1.2mmガイドピン

003A-015-12150



ガイドピンガイド

504B-003-12



ディプスゲージ

502B-005




2.3mmキャニュレイトドリル

500B-004-23090H



トルクスキャニュレイトドライバー T15

503B-001-T15

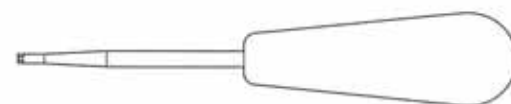

★インプラントセット


コーティカル スクリュー



キャンセラス スクリュー



★手術器具セット

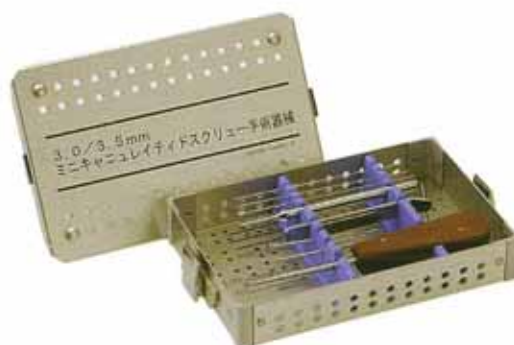

(3.0mm, 3.5mm共通)

3.5mm キャニュレイティドスクリュー

インプラント

コーティカル スクリュー



製造承認番号: 20700BZZ00125000

カタログ番号	全 長	標準セット入数
005A-003-012	12mm	2
005A-003-014	14mm	2
005A-003-016	16mm	2
005A-003-018	18mm	2
005A-003-020	20mm	2
005A-003-022	22mm	2
005A-003-024	24mm	2
005A-003-026	26mm	2
005A-003-028	28mm	2
005A-003-030	30mm	2
005A-003-032	32mm	2
005A-003-034	34mm	2
005A-003-036	36mm	2
005A-003-038	38mm	2
005A-003-040	40mm	2
005A-003-045	45mm	2
005A-003-050	50mm	2

キャンセラス スクリュー



製造承認番号: 20700BZZ00125000

カタログ番号	全 長	標準セット入数
005A-009-012	12mm	2
005A-009-014	14mm	2
005A-009-016	16mm	2
005A-009-018	18mm	2
005A-009-020	20mm	2
005A-009-022	22mm	2
005A-009-024	24mm	2
005A-009-026	26mm	2
005A-009-028	28mm	2
005A-009-030	30mm	2
005A-009-032	32mm	2
005A-009-034	34mm	2
005A-009-036	36mm	2
005A-009-038	38mm	2
005A-009-040	40mm	2
005A-009-045	45mm	2
005A-009-050	50mm	2

フラットワッシャー



製造承認番号: 20900BZZ00861000

カタログ番号	内 径	外 径	標準セット入数
017A-001-08004	φ4mm	φ8mm	2

スパイク付きワッシャー



製造承認番号: 20700BZZ00125000

カタログ番号	内 径	外 径	標準セット入数
005A-016-06		φ6mm	2
005A-016-08	φ3.6mm	φ8mm	2
005A-016-10		φ10mm	2

手術器具

1.2mmガイドピン

003A-015-12150



ガイドピンガイド

504B-003-12



ディプスゲージ

502B-005




2.6mmキャニュレイティドドリル

500B-004-26090H



トルクスキャニュレイティドドライバー T15

503B-001-T15

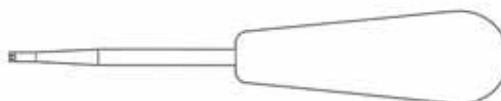

インプラントセット


コーティカル スクリュー



キャンセラス スクリュー



手術器具セット

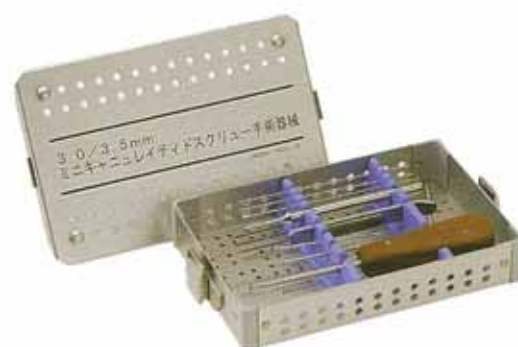

(3.0mm, 3.5mm共通)

4.0mm キャニュレイティド キャンセラス スクリュー

★インプラント

キャンセラス スクリュー



製造承認番号: 20700BZZ00125000

カタログ番号	全 長	標準セット入数
005A-340-026	26mm	2
005A-340-028	28mm	2
005A-340-030	30mm	2
005A-340-032	32mm	2
005A-340-034	34mm	2
005A-340-036	36mm	2
005A-340-038	38mm	2
005A-340-040	40mm	2
005A-340-042	42mm	2
005A-340-044	44mm	2
005A-340-046	46mm	2
005A-340-048	48mm	2
005A-340-050	50mm	2
005A-340-055	55mm	2
005A-340-060	60mm	2
005A-340-065	65mm	2
005A-340-070	70mm	2

フラットワッシャー



製造承認番号: 21000BZZ00335000

カタログ番号	内 径	外 径	標準セット入数
018A-012-08	φ4.5mm	φ8mm	2

スパイク付きワッシャー



製造承認番号: 21000BZZ00335000

カタログ番号	内 径	外 径	標準セット入数
018A-013-10	φ4.5mm	φ10mm	2

★手術器具

1.6mmガイドピン

003A-015-16150



ガイドピンガイド

504B-003-16



ディプスゲージ

520B-001




3.0mmキャニュレイティドドリル

500B-004-30140H




キャニュレイティドタップ

520B-002

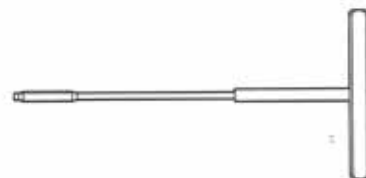


トルクスキャニュレイティドドライバー-T25

503B-001-T25

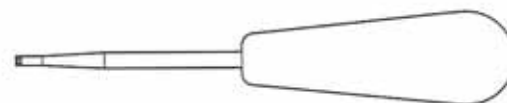

★インプラント&手術器具セット

スクリュー、ワッシャー、手術器具がひとつの滅菌ケースに収納されています。

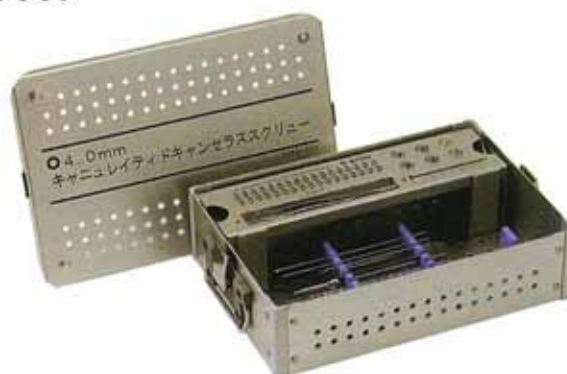

4.5mm キャニュレイティド キャンセラス スクリュー

★インプラント

キャンセラス スクリュー



製造承認番号: 21000BZZ00335000

カタログ番号	全 長	標準セット入数
018A-011-020	20mm	※
018A-011-022	22mm	※
018A-011-024	24mm	※
018A-011-026	26mm	※
018A-011-028	28mm	※
018A-011-030	30mm	2
018A-011-032	32mm	2
018A-011-034	34mm	2
018A-011-036	36mm	2
018A-011-038	38mm	2
018A-011-040	40mm	2
018A-011-042	42mm	2
018A-011-044	44mm	2
018A-011-046	46mm	2
018A-011-048	48mm	2
018A-011-050	50mm	2
018A-011-055	55mm	2
018A-011-060	60mm	2
018A-011-065	65mm	2
018A-011-070	70mm	2

※オプション

フラットワッシャー



製造承認番号: 21000BZZ00335000

カタログ番号	内 径	外 径	標準セット入数
018A-012-10	φ4.8mm	φ10mm	2

スパイク付きワッシャー



製造承認番号: 21000BZZ00335000

カタログ番号	内 径	外 径	標準セット入数
018A-013-12	φ6mm	φ12mm	2

ツバ付きセルフアライメントワッシャー



製造承認番号: 20900BZZ00861000

カタログ番号	内 径	外 径	標準セット入数
017A-003-10006	φ6mm	φ10mm	2

★手術器具

1.6mmガイドピン

003A-015-16150



ガイドピンガイド

504B-003-16



ディプスゲージ

510B-001



3.2mmキャニュレイティドドリル

500B-004-32145H



キャニュレイティドタップ

510B-002




トルクスキャニュレイティドパワードライバービットT25

503B-004-T2517




トルクスキャニュレイティドドライバーT25

503B-001-T25

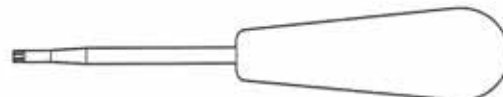

カウンターシンク

500B-003-2

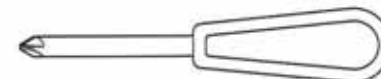

★インプラント&手術器具セット

スクリュー、ワッシャー、手術器具がひとつの滅菌ケースに収納されています。



5.5mm キャニュレイティド キャンセラス ヒップスクリュー

インプラント

キャンセラス ヒップスクリュー



製造承認番号: 200700BZZ00125000

カタログ番号	全 長	標準セット入数
005A-013-035	35mm	※
005A-013-040	40mm	※
005A-013-045	45mm	※
005A-013-050	50mm	※
005A-013-055	55mm	※
005A-013-060	60mm	2
005A-013-065	65mm	2
005A-013-070	70mm	3
005A-013-075	75mm	3
005A-013-080	80mm	3
005A-013-085	85mm	3
005A-013-090	90mm	3
005A-013-095	95mm	3
005A-013-100	100mm	3
005A-013-105	105mm	2
005A-013-110	110mm	2
005A-013-115	115mm	2
005A-013-120	120mm	2

※オプション

フラットワッシャー



製造承認番号: 20900BZZ00861000

カタログ番号	内 径	外 径	標準セット入数
017A-001-13007	φ 7mm	φ 13.0mm	4

手術器具

2.0mmガイドピン

003A-014-20230



パラレルガイド

504B-005-20



ガイドピンディプスゲージ

502B-002



4.2mmキャニュレイティドドリル

500B-004-42220H



キャニュレイティドタップ

501B-014



トルクスキャニュレイティドインサーターT30

503B-002-T30




トルクスキャニュレイティドパワードライバービットT30

503B-004-T30



※抜釘用レンチ
※オプション

503B-007-T30H / 503B-010-T30

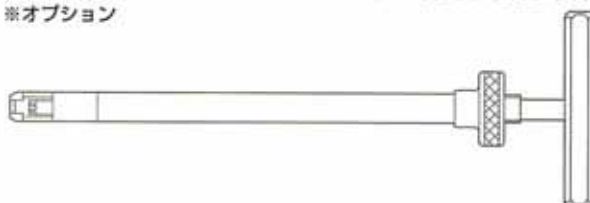

インプラント&手術器具セット

スクリュー、ワッシャー、手術器具がひとつの滅菌ケースに収納されています。



6.5mm キャニュレイティド キャンセラス ヒップスクリュー

★インプラント

キャンセラス ヒップスクリュー



製造承認番号: 200700BZZ00125000

カタログ番号	全 長	標準セット入数
005A-014-035	35mm	※
005A-014-040	40mm	※
005A-014-045	45mm	※
005A-014-050	50mm	※
005A-014-055	55mm	※
005A-014-060	60mm	2
005A-014-065	65mm	2
005A-014-070	70mm	3
005A-014-075	75mm	3
005A-014-080	80mm	3
005A-014-085	85mm	3
005A-014-090	90mm	3
005A-014-095	95mm	3
005A-014-100	100mm	3
005A-014-105	105mm	2
005A-014-110	110mm	2
005A-014-115	115mm	2
005A-014-120	120mm	2

※オプション

フラットワッシャー



製造承認番号: 20900BZZ00861000

カタログ番号	内 径	外 径	標準セット入数
017A-001-13007	φ7mm	φ13.0mm	4

★手術器具

2.8mmガイドピン

003A-014-28230



パラレルガイド

504B-005-28



ガイドピンディプスゲージ

502B-002



5.2mmキャニュレイティドドリル

500B-004-52220H




キャニュレイティドタップ

501B-015



トルクスキャニュレイティドインサーターT30

503B-002-T30

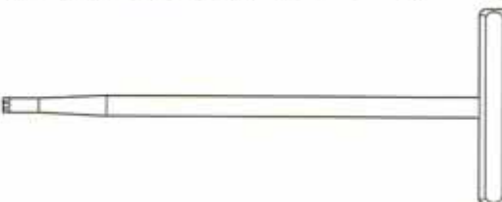

トルクスキャニュレイティドパワードライバービットT30

503B-004-T30



※抜釘用レンチ

503B-007-T30H / 503B-010-T30

※オプション



★インプラント&手術器具セット

スクリュー、ワッシャー、手術器具がひとつの滅菌ケースに収納されています。



骨頭すべり症用キャニュレイティドスクリュー

5.5mm SCFEショートスレッドスクリュー

インプラント

5.5mm SCFEスクリュー 〈ねじ部長さ7.0mm〉



製造承認番号: 21200BZZ00607000

カタログ番号	全 長	標準セット入数
029A-004-050	50mm	オプション
029A-004-055	55mm	オプション
029A-004-060	60mm	オプション
029A-004-065	65mm	オプション
029A-004-070	70mm	3
029A-004-075	75mm	3
029A-004-080	80mm	3
029A-004-085	85mm	3
029A-004-090	90mm	3
029A-004-095	95mm	3
029A-004-100	100mm	2
029A-004-105	105mm	2
029A-004-110	110mm	2
029A-004-115	115mm	2
029A-004-120	120mm	2

手術器具

2.0mmガイドピン

003A-014-20230



パラレルガイド (φ5.5mm用)

504B-005-20



SCFE用ガイドピンディプスゲージ

502B-003




4.2mmキャニュレイティドリル (φ5.5mm用) 500B-004-42220H




キャニュレイティドタップ
(φ5.5mm用)

501B-014

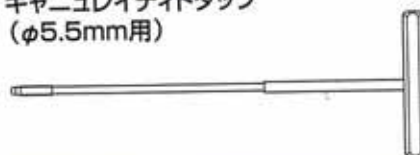

トルクスキャニュレイティドインサーターT30 503B-002-T30

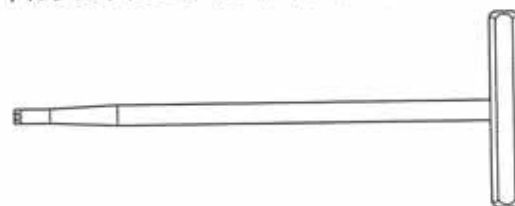


トルクスキャニュレイティドパワードライバービットT30 503B-004-T30



抜釘用ボックスレンチ

503B-003

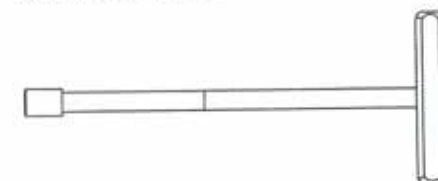

インプラント&手術器具セット

スクリュー、手術器具がひとつの滅菌ケースに収納されています。



インプラント

6.5mm SCFEスクリュー 〈ねじ部長さ7.0mm〉



製造承認番号: 21200BZZ00607000

カタログ番号	全 長	標準セット入数
029A-005-050	50mm	オプション
029A-005-055	55mm	オプション
029A-005-060	60mm	オプション
029A-005-065	65mm	オプション
029A-005-070	70mm	3
029A-005-075	75mm	3
029A-005-080	80mm	3
029A-005-085	85mm	3
029A-005-090	90mm	3
029A-005-095	95mm	3
029A-005-100	100mm	2
029A-005-105	105mm	2
029A-005-110	110mm	2
029A-005-115	115mm	2
029A-005-120	120mm	2
029A-005-125	125mm	オプション
029A-005-130	130mm	オプション

手術器具

2.8mmガイドピン

003A-014-28230



パラレルガイド (φ6.5mm用)

504B-005-28



SCFE用ガイドピンディブスゲージ

502B-003




5.2mmキャニュレイティドドリル (φ6.5mm用)

500B-004-52220H



キャニュレイティドタップ
(φ6.5mm用)

501B-015

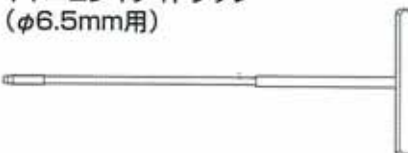

トルクスキャニュレイティドインサーターT30 503B-002-T30




トルクスキャニュレイティドパワードライバービットT30 503B-004-T30



抜釘用ボックスレンチ

503B-003

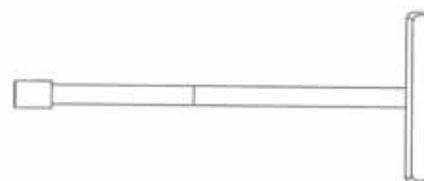

インプラント&手術器具セット

スクリュー、手術器具がひとつの滅菌ケースに収納されています。



キャニュレイティドスクリュー 諸元表



(単位:mm)

品名	ねじ外径	シャフト径 (ねじ谷径)	ねじピッチ	ねじ長さ	頭部外径	頭部高さ	全長	中空穴径	使用 ガイドピン径
3.0mm キャニュレイティド コーティカルスクリュー	3.0	2.1	1.0	全ねじ	4.5	2.2	12~40	1.3	1.2
3.0mm キャニュレイティド キャンセラススクリュー	3.0	2.1	1.25	7(L=18まで) 10(L=20以上)	4.5	2.4	12~40	1.3	1.2
3.5mm キャニュレイティド コーティカルスクリュー	3.5	2.6	1.0	全ねじ	5.0	2.3	12~50	1.3	1.2
3.5mm キャニュレイティド キャンセラススクリュー	3.5	2.5	1.25	7(L=18まで) 10(L=20以上)	5.0	2.5	12~50	1.3	1.2
4.0mm キャニュレイティド キャンセラススクリュー	4.15	2.9	1.5	1/3ねじ	5.5	2.6	26~70	1.7	1.6
4.5mm キャニュレイティド キャンセラススクリュー	4.6	3.1	1.5	10(L=20~24) 12(L=26~28) 14(L=30~34) 16(L=36~40) 18(L=42~48) 20(L=50~55) 25(L=60~70)	7.2	4.0	20~70	1.7	1.6
5.5mm キャニュレイティド キャンセラスヒップスクリュー	5.5	4.0	1.75	20	7.7	5.0	35~120	2.2	2.0
6.5mm キャニュレイティド キャンセラスヒップスクリュー	6.5	5.0	1.75	20	7.7	5.0	35~120	3.0	2.8
7.5mm キャニュレイティド キャンセラススクリュー	7.5	4.5	2.4	20	8.0	3.5	45~120	2.2	2.0
5.5mm SCFEショート スレットスクリュー	5.5	4.0	1.75	7	8.0 (二面幅)	7.5	50~120	2.2	2.0
6.5mm SCFEショート スレットスクリュー	6.5	5.0	1.75	7	8.0 (二面幅)	7.5	50~130	3.0	2.8

 **メイラ 株式会社**

〒453-0015

名古屋市中村区椿町17番15号

TEL: 052-459-1277

FAX: 052-459-1282

url: <http://www.meira.co.jp>