


DTJ Screw

Double Threaded Screw, Japan

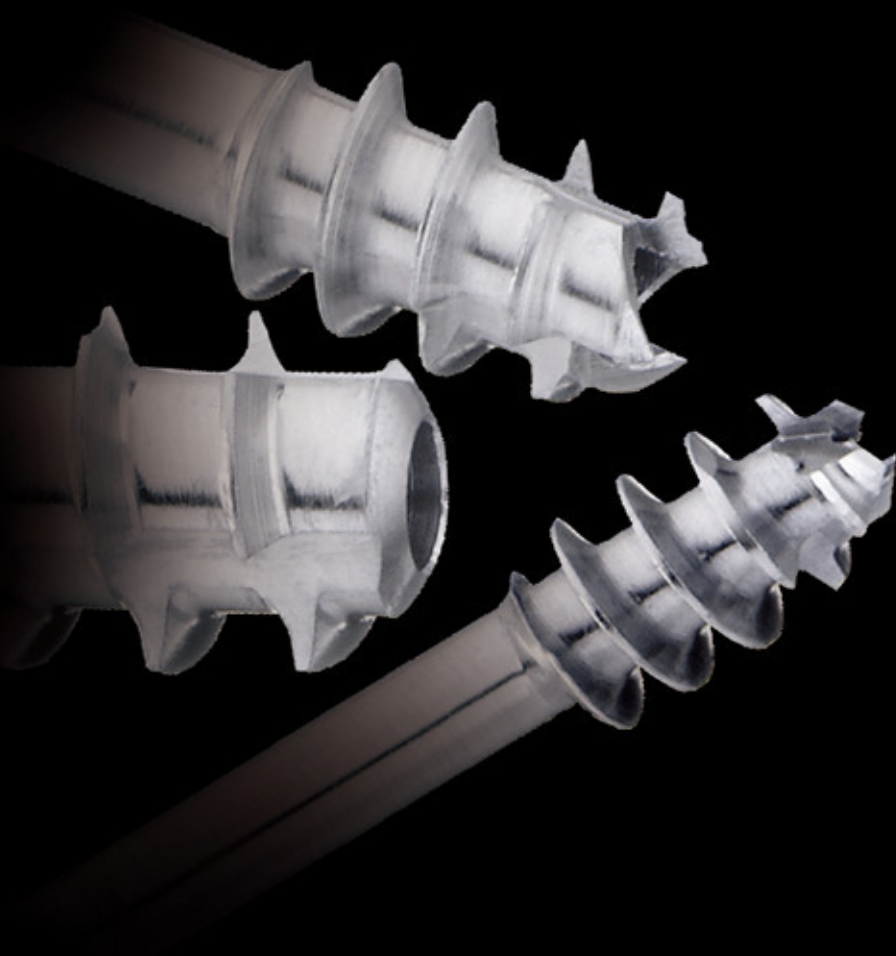

DTJ Mini

DTJ

DTJ Large

先進の技術と経験から生まれた安心の品質、信頼の実績。DTJ Screwは、厳しい医療現場のニーズに的確にお応えします。

Cannulated

DTJスクリューは、刺入、固定に最適な中空タイプとなっていますので、最小侵襲による経皮的なスクリュー挿入が可能です。

Good Fixation

DTJスクリューの近位と遠位のねじ山は十分な高さを持っています。このためピッチ差による引き寄せ効果が期待できます。

Non Drill, Non Tap

DTJスクリューは遠位のねじ先端にドリリング機構とタッピング機構を併せ持った、今までにない形状のスクリューです。ドリリング・タッピングが不要なため、手術時間の短縮に貢献します。

※DTJラージスクリューはセルフドリルではありませんのでドリリングをしていただく必要があります。

Choice of Length

DTJ(全長20～26mmのみ)では、スクリューの長さを1mm刻みで設定。最適な長さのスクリュー挿入ができます。

DTJ Mini Screw

DTJ ミニ スクリュー



- 滅菌済
- 適応症例
- 舟状骨骨折
 - ・舟状骨1/3中極骨折の中極骨片が小さい症例
 - ・舟状骨1/3遠位骨折で長軸方向に骨折線が走る症例
 - ・子供、女性で舟状骨が小さくDTJスクリューの刺入が難しい症例
 - 肘関節
 - ・橈骨頭骨折、尺骨鉤状突起骨折(骨片が割れていない場合等)
 - 手指関節
 - ・基節骨基部の剥離骨折等



- ①0.8mmガイドピン [003A-015-08120]
- ②1.2mmガイドピン [003A-015-12150]
- ③2.0mmキャニュレイテッドドリル [500B-004-20085H]
- ④キャニュレイテッド六角ドライバービット [503B-101-016,NRS-M-039]
- ⑤0.8mmガイドピン用ガイド [504B-003-008]
- ⑥1.2mmガイドピン用ガイド [504B-003-012]
- ⑦ガイドピンデブスケージ [528B-001]



全 長	カタログ番号	セット入り数
10mm	M036A-027-010	1
12mm	M036A-027-012	2
13mm	M036A-027-013	2
14mm	M036A-027-014	2
15mm	M036A-027-015	2
16mm	M036A-027-016	2
17mm	M036A-027-017	2
18mm	M036A-027-018	2
20mm	M036A-027-020	2

注記:DTJミニスクリューは滅菌製品です。

DTJ Screw

DTJ スクリュー



- 未滅菌
- 適応症例
- 舟状骨骨折
 - 有鉤骨鉤部骨折
 - 月状骨骨折
 - 足関節骨折




- ①1.2mmガイドピン [003A-015-12150]
- ②2.3mmキャニュレイテッドドリル [500B-004-23090H]
- ③キャニュレイテッド六角ドライバー [503B-001-020]
- ④ガイドピンガイド [504B-003-012]
- ⑤ガイドピンデブスケージ [517B-001]
- ⑥ピンセット [NRS-M-011]



全 長	カタログ番号	セット入り数
16mm	030A-032-016	2
18mm	030A-032-018	2
20mm	030A-032-020	2
21mm	030A-032-021	2
22mm	030A-032-022	2
23mm	030A-032-023	2
24mm	030A-032-024	2
25mm	030A-032-025	2
26mm	030A-032-026	2
28mm	030A-032-028	2
30mm	030A-032-030	2
32mm	030A-032-032	オプション
34mm	030A-032-034	オプション
36mm	030A-032-036	オプション
38mm	030A-032-038	オプション
40mm	030A-032-040	オプション

DTJ Large Screw

DTJ ラージ スクリュー

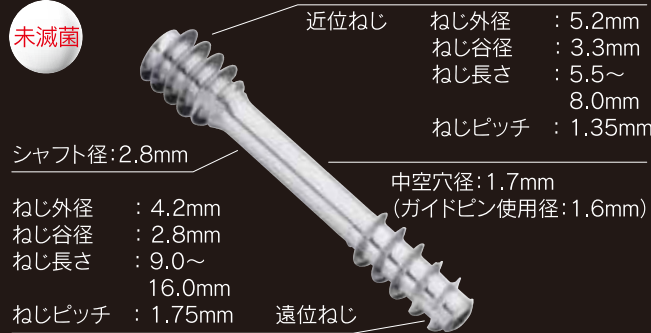

- 未滅菌
- 適応症例
- 手関節 (橈骨・手根骨骨折等)
 - 脛骨遠位部内側内顆部骨折
 - 脛骨高原骨折
 - 足関節骨折



- ①1.6mmガイドピン [003A-015-16150]
- ②3.0mmキャニュレイテッドドリル [500B-004-30140H]
- ③3.5mmキャニュレイテッドドリル [500B-004-35100H]
- ④キャニュレイテッド六角ドライバー [503B-001-025]
- ⑤ガイドピンガイド [504B-003-16]
- ⑥ドリルガイド [521B-003]
- ⑦タップ&スクリューガイド [521B-004]



- ⑧キャニュレイテッドタップ [521B-002]
- ⑨ガイドピンデブスケージ [521B-001]
- ⑩ピンセット [NRS-M-011]

全 長	カタログ番号	セット入り数
25mm	033A-042-025	2
30mm	033A-042-030	2
35mm	033A-042-035	2
40mm	033A-042-040	2
45mm	033A-042-045	2
50mm	033A-042-050	2
55mm	033A-042-055	2
60mm	033A-042-060	2
65mm	033A-042-065	2
70mm	033A-042-070	2
75mm	033A-042-075	2

製造承認番号:21500BZZ00664000

注意事項

<DTJミニスクリュー>

- ①骨が硬く0.8mmガイドピンが刺入困難な場合は、1.2mmガイドピンを刺入し、0.8mmガイドピンに交換することを行ってください。1.2mmガイドピン及び専用ガイドも、DTJミニスクリュー器械セットに含まれています。
- ②骨が硬い、あるいはスクリュー刺入により骨片が割れる場合には2.0mmキャニュレティドドリルでプロキシマール側のみドリリングを行うことをおすすめ致します。(通常はこの操作は必要ありません。)

<DTJスクリュー>

- ①DTJスクリューの遠位ねじ先端はセルフドリル機構を備えており、基本的にはブレードドリルは必要ありませんが、皮質骨が硬い場合等、ドリリングが必要な際は、2.3mmキャニュレティドドリルをご使用下さい。その際、遠位までドリリングをされると、遠位部のねじの“きき”が悪くなることがありますのでご注意下さい。
- ②スクリュー挿入時は、ドライバー先端をスクリュー六角穴の十分な深さまで挿入したことを確認した上で、ドライバーを回して下さい。ドライバー先端が六角穴の十分な深さまで入っていない状態でドライバーを回転させると、ドライバー先端部分が折損したり、スクリュー六角穴の壁面を破壊するおそれがあります。
- ③1.2mmガイドピンはスクリューが正しく挿入されるまで抜かないでください。挿入途中で抜いた場合、その後のスクリュー進入方向に狂いが出る場合があります。

<DTJラージスクリュー>

- ①当製品はセルフドリル機構は有しておりませんので、ドリリングの際には遠位側は、3.0mm、近位側は、3.5mmキャニュレティドドリルをご使用下さい。

製造・販売元

 **メイラ** 株式会社

〒453-0015
名古屋市中村区椿町17-15
TEL 052-459-1277 FAX 052-459-1282
<http://www.meira.co.jp>